

ADAPTARAP

- это новый вид повязки для копыт, предлагающий инновационный подход к перевязке копыт после обработки.



Растворимость



Безопасность



Адаптивность



Биоразлагаемость

Больше, чем
минеральное питание.
Вместе мы

можем больше.

Мы открываем путь к здоровью и улучшению качества жизни животных и людей.

В компании Zinpro этот путь начинается с уникальной программы кормления животных на основе высокоэффективных аминокислотных комплексов. Именно с кормления начинается выполнение более широкого круга задач, связанного с разработкой комплексных решений, инструментов и обучающих материалов, направленных на улучшение общего состояния здоровья животных для повышения их продуктивности, а также рентабельности производства.

Более 50 лет компания Zinpro сохраняет передовые позиции в разработке высокоэффективных аминокислотных комплексов и инновационных решений, способствующих улучшению здоровья и качества жизни как животных, так и людей. Будучи частной семейной компанией, Zinpro демонстрирует устойчивый рост благодаря качеству продукции, сплоченной команде высококлассных специалистов и стремлению помогать клиентам в достижении большего за счет решений для минерального кормления, имеющих научно доказанную эффективность. Поставляя продукцию более чем в 70 стран мира, компания Zinpro закрепила за собой статус глобального лидера в области оптимизации минерального питания и разработки умных решений, обеспечивающих благополучие и устойчивое развитие на международном уровне.



Узнайте больше на сайте zinpro.pro

Для получения инструкций и более подробной информации отсканируйте QR-код или посетите страницу zinpro.pro/adaptarap



©2021 Zinpro Corporation.
Zinpro Performance Minerals®
являются зарегистрированной
торговой маркой Zinpro Corp.
Все права защищены.

INT-D-4137-RU | 082021




ADAPTARAP™



**УНИКАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ПЕРЕВЯЗКИ
КОПЫТ**


ADAPTARAP™

- это уникальная повязка из композитного полимера, предназначенная для использования в период лечения копыт. В рамках программы по уходу за копытами, способствует сокращению случаев хромоты и улучшению состояния копыт.

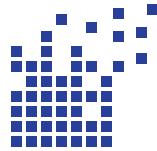

РАСТВОРИМОСТЬ

Повязка **ADAPTARAP** растворяется естественным образом в период от 2 часов до 5 дней в зависимости от микроклимата в помещении и условий содержания. Данная особенность позволяет не тратить время на снятие повязки, снизить уровень стресса у животных и сократить контакт с ними, обеспечивая большую безопасность для сотрудников фермы. Кроме того, уменьшается вероятность повторных инфекций, а также сдавливания и травмирования тканей, которые наблюдаются при несвоевременном снятии обычных повязок.

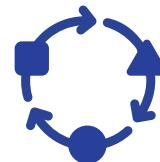

АДАПТИВНОСТЬ

Время растворения повязки **ADAPTARAP** зависит от влажности среды. В условиях повышенной влажности повязка растворяется быстрее, предотвращая скопление влаги и грязи, которые будут препятствовать заживлению раны и могут спровоцировать повторное воспаление. Использование повязки также снижает риск повреждений кожных покровов от накопительного воздействия химических средств, используемых в копытных ваннах. В сухих помещениях повязка **ADAPTARAP** дольше сохраняется на копыте, увеличивая продолжительность контакта лекарства с пораженным участком.



БИОРАЗЛАГАЕМОСТЬ

Повязка **ADAPTARAP** обладает пластичными свойствами, но не растягивается, существенно снижая риск травмирования тканей от передавливания.



БЕЗОПАСНОСТЬ

Повязка **ADAPTARAP** полностью биоразлагается. Уникальность данного свойства заключается в полном отсутствии отходов, а значит и каких-либо проблем с засором оборудования и систем навозоудаления. Кроме того, исключен риск образования отходов, требующих особых методов утилизации.



ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЯЗКИ ADAPTARAP

Состав ADAPTARAP из композитного полимера придает повязке уникальные свойства пластика, а пластичная структура обеспечивает плотность прилегания, позволяя тугу накладывать повязку без риска повреждения тканей.

Структура ADAPTARAP обеспечивает минимально необходимый по времени контакт лекарства с кожей, причем повязка растворяется в период от 2 часов до 5 дней с момента ее наложения. Сохранность повязки на пораженном участке можно увеличивать за счет дополнительного количества слоев при обмотке копыта.

При наложении повязку необходимо оборачивать между копытцами и вокруг всего копыта, избегая круговых ходов без перекрестных витков, поскольку такая обмотка сократит время растворения повязки. Кроме того, проследите за тем, чтобы на задней части конечности повязка располагалась чуть ниже висячих пальцев – это предотвратит ее соскальзывание во время курса лечения.

После наложения повязки необходимо смочить конец бинта водой и легким движением при克莱ить его к основной обмотке.

Использование ADAPTARAP расширяет границы возможностей при лечении хромоты в стаде, а в сочетании со специальной программой кормления и комплексами Zinpro Performance Minerals®, способствует сохранению здоровья копыт.



Повязка **ADAPTARAP** упакована в пакеты по 3 рулона в каждом (длина 10 м x ширина 120 мм).

Поставляется в коробках по 36 пакетов (108 рулонов). Одного рулона, как правило, хватает для наложения повязки на 5-6 конечностей (по 1,5-2 метра на одно копыто).